


Zum Entfernen
einfach abziehen



Diese Patchelektroden sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

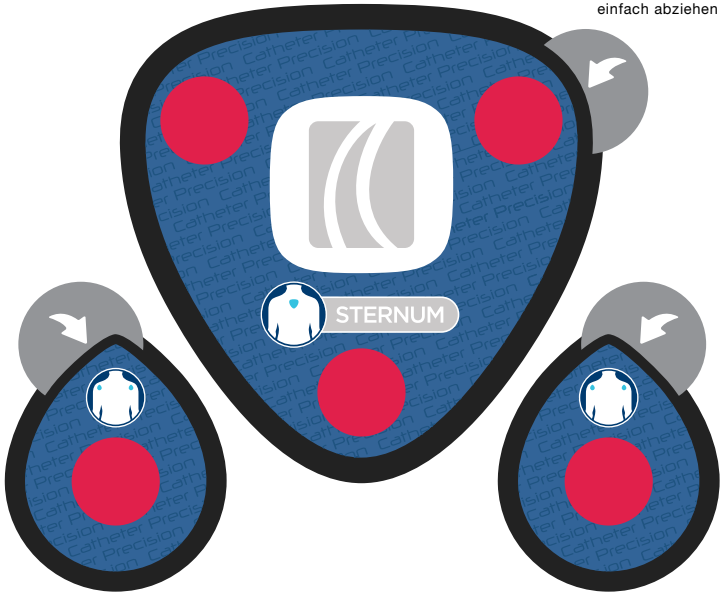

Die Seriennummer der Elektroden muss in die VIVO-App eingegeben werden. Das 3D-Bild kann erst aufgenommen werden, nachdem die Seriennummer der Einmalelektroden eingegeben wurde.



Catheter Precision Inc.

1670 Highway 160 West, Suite 205

Fort Mill, SC 29708, USA

Telephone: +1 (973) 691-2000

www.catheterprecision.com



USE BY:



YYYY-MM-DD

SN

###-###-###

Rx only

MD

Anleitung zum Platzieren der Patchelektroden

Anbringen der Patchelektroden


Die Haut an der gewählte Applikationsstelle muss sauber, trocken und frei von Körperlotion sein, um eine optimale Haftung der Elektrode zu gewährleisten. Die EKG-Elektroden werden unter Befolgung der Standardverfahren angebracht/entfernt.

Platzieren der Sternum-Patchelektrode

Die Sternum-Elektrode so platzieren, dass sich die Oberseite der Elektrode in der Sternummitte (grüne gestrichelte vertikale Linie) befindet.

Platzieren der Schulter-Patchelektroden

Die Schulter-Patchelektroden in einer Linie zum rechten und linken Körperrand (blaue gestrichelte vertikale Linien) und parallel zur Schulterhöhe (durchgehende rote Linie) platzieren.

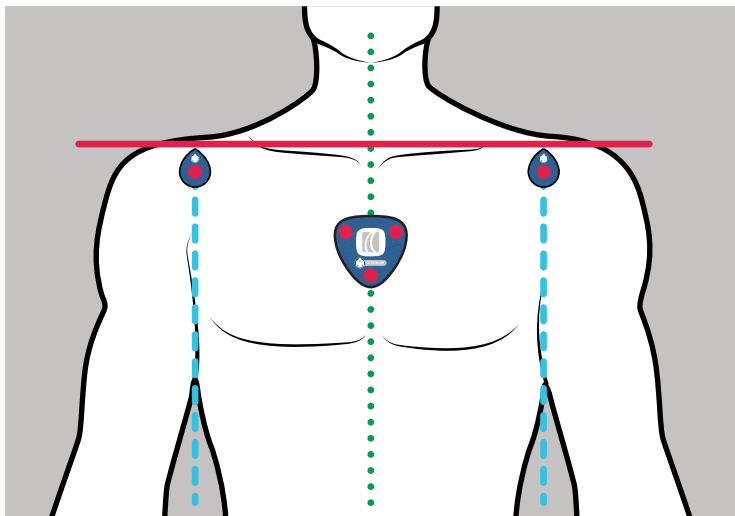

VORSICHT: Wenn die Patchelektroden nicht an der richtigen Körperstelle angebracht werden, sind falsche VIVO-Ergebnisse möglich.

Fragen oder Kommentare?

Wenden Sie sich bitte an CustomerService@CatheterPrecision.com