




Piastre di
posizionamento

Rimuovere la
protezione adesiva

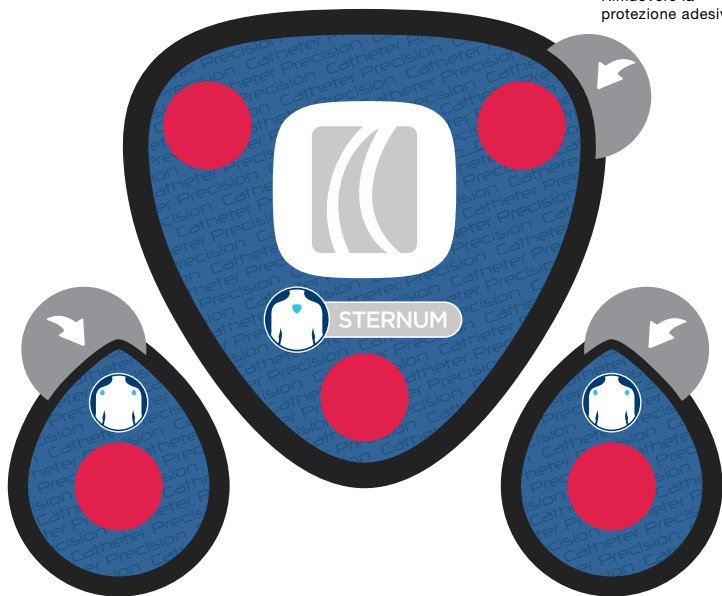

Queste piastre di posizionamento sono monouso.



Immettere il numero di serie delle piastre nell'applicazione VIVO. Non è possibile acquisire l'immagine 3D se non si inserisce il numero di serie una tantum.



Catheter Precision Inc.

1670 Highway 160 West, Suite 205

Fort Mill, SC 29708, USA

Telephone: +1 (973) 691-2000

www.catheterprecision.com



USE BY:



YYYY-MM-DD

SN

###-###-###

Rx only

MD

Istruzioni per l'applicazione delle piastre di posizionamento

Applicazione delle piastre di posizionamento


Per garantire l'adesione ottimale delle piastre alla cute, i siti di applicazione devono essere puliti, asciutti e privi di creme e unguenti. Seguire le prassi standard per l'applicazione/rimozione degli elettrodi per ECG.

Collocazione della piastra di posizionamento sullo sterno

La piastra dello sterno deve essere collocata con la parte superiore al centro dello sterno (linea punteggiata verticale verde).

Collocazione delle piastre di posizionamento sulle spalle

Collocare le piastre sulla spalla destra e sinistra in modo che definiscano il limite esterno del corpo lateralmente (linea tratteggiata azzurra) e che siano alla stessa altezza sulle spalle (linea continua rossa).

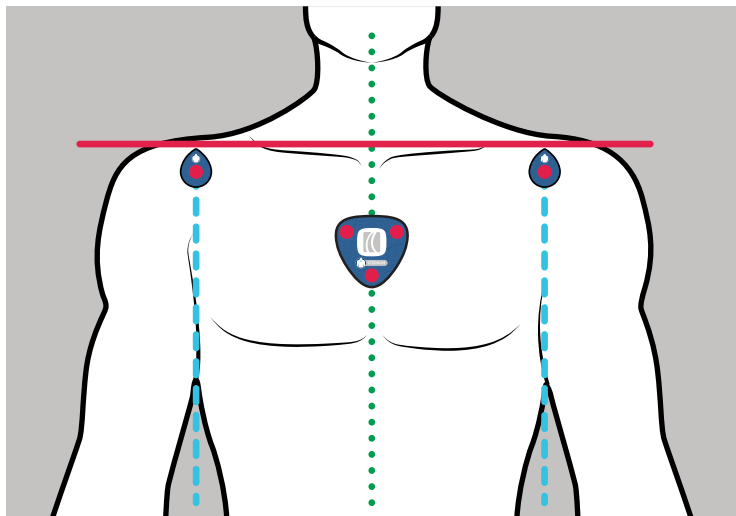

ATTENZIONE – Se le piastre non vengono collocate sul sito anatomico corretto, i risultati VIVO possono essere errati.

Domande o commenti?

Contattateci all'indirizzo CustomerService@CatheterPrecision.com