

Estos parches de posicionamiento son de un solo uso.



Ingrese el número de serie de los parches en la aplicación VIVO. No podrá tomarse la imagen tridimensional a menos que se ingrese el número de serie de uso único.



Catheter Precision Inc.

1670 Highway 160 West, Suite 205

Fort Mill, SC 29708, USA

Telephone: +1 (973) 691-2000

www.catheterprecision.com



USE BY: 

YYYY-MM-DD

SN

###-###-###

Rx only

MD

Instrucciones para aplicar los parches de posicionamiento

Aplicación de los parches de posicionamiento


Los lugares de aplicación deben estar limpios, secos y exentos de cualquier loción corporal; esto permitirá que los parches se adhieran de forma óptima a la piel. Siga la práctica habitual para aplicar/retirar los electrodos de ECG.

Colocación del parche de posicionamiento del esternón

Este parche debe colocarse con la parte superior en el centro del esternón (línea vertical punteada verde).

Colocación de los parches de posicionamiento de los hombros

Coloque los parches de los hombros derecho e izquierdo de modo que definan el límite exterior del cuerpo en sentido lateral (líneas verticales discontinuas azules) y queden paralelos a la altura de los hombros (línea continua roja).

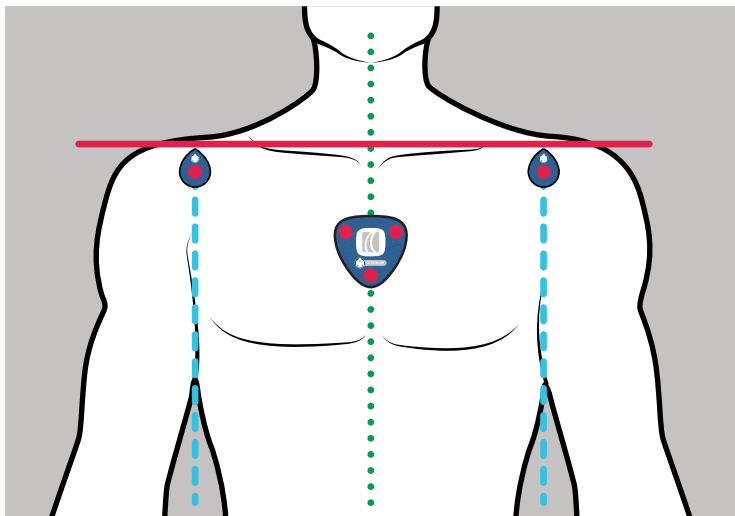

ADVERTENCIA: Si los parches no se colocan en la ubicación anatómica correcta, puede que se obtengan resultados incorrectos con VIVO.

¿Tiene preguntas o comentarios?

Contáctenos en CustomerService@CatheterPrecision.com